




## Mise en Place Module 2

## Explication du module :

Ce module a pour but de récupérer un objet sur une position définie puis de l'amener à une autre position définie elle aussi.

## Les étapes à suivre :

- 1) Suivre les étapes de la notice « Mise en Place des Démonstrations »
- 2) Placer les plaques sur la grille comme sur les photos ci-dessous (la couleur de la plaque n'est pas importante).

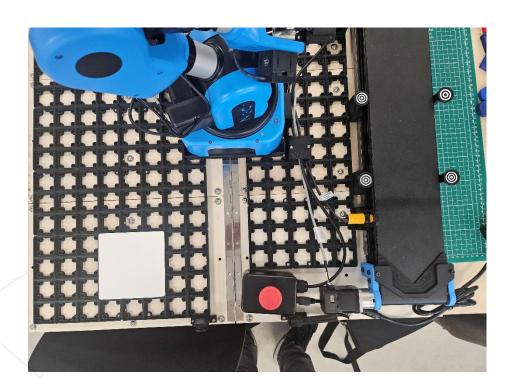







Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen


École d'ingénieurs : Énergie & Numérique • Agronomie & Agro-industries Alimentation & Santé • Géosciences & Environnement Génie de l'environnement École vétérinaire







- 3) Lancer l'ordinateur et le logiciel NiryoStudio.
- 4) Sélectionner dans la liste mes derniers programmes le programme Module 2 VF et le lancer.

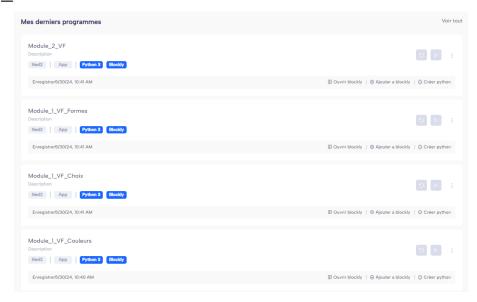

S'il n'apparaît pas, il faut aller dans l'onglet « Blockly » présent dans la liste à gauche et appuyer sur le bouton « Ouvrir » en haut à droite. Puis sélectionner le programme voulu.

- 5) Mettre les objets fournis (carré et rond de couleur) au centre de la plaque puis lancer le programme
- ! Attention il faut mettre les objets un par un. !









École d'ingénieurs : Énergie & Numérique • Agronomie & Agro-industries Alimentation & Santé • Géosciences & Environnement Génie de l'environnement École vétérinaire